

Clearblue®

EARLY
FRÜHERKENNUNG

Schwangerschaftstest

Ab dem Fälligkeitstag der Periode zu über 99 % zuverlässig.
Bitte lesen Sie diese Anweisungen aufmerksam durch, bevor Sie den Test durchführen.

1 TESTZEITPUNKT

KAPPE SICH FÄRBENDE TESTSPITZE



- Ein Test ist bis zu 6 Tage vor dem Ausbleiben der Periode möglich, d. h. 5 Tage vor dem Fälligkeitstag der Periode.
- Wenn Sie vor Fälligkeit Ihrer Periode testen, verwenden Sie hierfür Morgenurin. Sie können aber auch zu jedem anderen Zeitpunkt testen.
- Nehmen Sie vor dem Test nicht übermäßig viel Flüssigkeit zu sich.

2 DURCHFÜHRUNG DES TESTS

A



URINSTRAHL

Sie müssen die sich färbende Testspitze für volle 5 Sekunden in den Urinstrahl halten.

ODER

B



PROBE

Beginnen Sie mit der Zeitnahme, sobald Sie sehen, dass sich die Spitze rosa färbt.

Tauchen Sie nur die Testspitze vollständig ein.

- Entfernen Sie die Folienverpackung und nehmen Sie die Kappe ab. **Testen Sie unmittelbar danach.**

WÄHLEN SIE IHRE TESTMETHODE

- **WICHTIG: Die sich färbende Testspitze färbt sich rasch rosa, um zu zeigen, dass sie Urin aufnimmt.**

A Halten Sie die sich färbende Testspitze volle 5 Sekunden lang in den Urinstrahl.

ODER

B Fangen Sie den Urin in einem sauberen und trockenen Behälter auf und tauchen Sie die Testspitze für volle 20 Sekunden lang in die Urinprobe ein.


- Färbt sich die Testspitze nicht vollständig rosa, siehe F7.
- Setzen Sie die Kappe wieder auf und legen Sie das Teststäbchen auf eine flache Unterlage.
- Beginnen Sie mit der Zeitnahme.

3
Minuten

WARTEN SIE MINDESTENS 3 MINUTEN

Bevor Sie Ihr Ergebnis ablesen

3 ABLESEN IHRES ERGEBNISSES

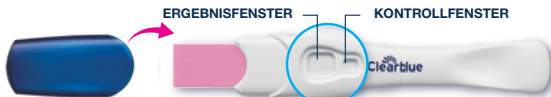

NICHT SCHWANGER



Abbildung A

ZWEI LINIEN BEDEUTEN, DASS SIE SCHWANGER SIND



Abbildung B



Abbildung C



Abbildung D

ES SPIELT KEINE ROLLE, WIE BLASS ODER DUNKEL DIE LINIEN SIND.

- Möglicherweise erscheint rasch eine Linie im Kontrollfenster, Sie **MÜSSEN** jedoch 3 Minuten warten, bevor Sie Ihr Ergebnis ablesen.

Erscheint keine blaue Linie im Kontrollfenster, dann ist der Test nicht korrekt abgelaufen (siehe F8).

- Ist das Ergebnis „**Nicht Schwanger**“, siehe F4.
- Ist das Ergebnis „**Schwanger**“, siehe F3.
- Wenn Sie sich immer noch unsicher sind, ob das Ergebnis korrekt ist, siehe F9.

WICHTIG: Lesen Sie das Ergebnis innerhalb von **10 Minuten** nach Durchführung des Tests ab. Ignorieren Sie Veränderungen Ihres Resultates nach dieser Zeit.

1 Wie funktioniert Clearblue® Early?

Wenn Sie schwanger sind, produziert Ihr Körper das Schwangerschaftshormon hCG (humanes Choriongonadotropin). Dieser Test kann schon winzige Mengen von hCG in Ihrem Urin nachweisen. (Die Empfindlichkeit dieses Tests liegt bei 10 mIU/ml).

2 Wann kann ich den Test mit Clearblue® Early durchführen?

Sie können den Test bis zu 6 Tage vor dem Ausbleiben der Periode, d. h. 5 Tage vor dem Fälligkeitstag der Periode durchführen. Wenn Sie vor dem Fälligkeitstag Ihrer Periode testen und das Ergebnis „Nicht Schwanger“ lautet, kann es sein, dass Sie trotzdem schwanger sind. Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse aus Labortests mit Proben aus der Frühschwangerschaft.

Frühes Testen	
Anzahl der Tage vor dem Fälligkeitstag der Periode	% der schwangeren Frauen, die das Ergebnis „Schwanger“ erhalten haben
0	>99%
1	>99%
2	>99%
3	>99%
4	96%
5	79%

3 Mein Test hat ergeben, dass ich „Schwanger“ bin. Was soll ich tun?

Sie sollten Ihren Arzt aufsuchen, um mit ihm das weitere Vorgehen zu besprechen.

4 Mein Test hat ergeben, dass ich „Nicht Schwanger“ bin, aber ich glaube, das stimmt nicht. Was soll ich tun?

Es kann sein, dass Sie nicht schwanger sind oder die hCG-Konzentration zu niedrig ist, um es nachweisen zu können, oder dass Sie den Fälligkeitstag der Periode falsch berechnet haben. Wenn Sie früher getestet haben, testen Sie erneut, wenn Ihre Periode fällig ist. Wenn Ihre Periode überfällig ist, führen Sie nach drei Tagen einen weiteren Test durch. Wenn das Ergebnis dieses Tests ebenfalls „Nicht Schwanger“ lautet und Ihre Periode immer noch nicht eingestuft hat, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

5 Zuerst wurde das Testergebnis „Schwanger“ angezeigt, doch bei einem erneuten Test wurde „Nicht Schwanger“ angezeigt oder ich habe meine Periode bekommen. Was bedeutet das?

Während der Test eine Zuverlässigkeit von 99 % hinsichtlich des Nachweises des Schwangerschaftshormons ab dem Fälligkeitstag Ihrer Periode aufweist, ist es möglich, dass das Ergebnis „Schwanger“ angezeigt wird und Sie später feststellen, dass Sie nicht schwanger sind (d. h., dass Sie später das Ergebnis „Nicht Schwanger“ erhalten oder Sie Ihre Periode bekommen). Dies kann auf einen natürlichen Abgang während der Frühschwangerschaft, auch bekannt als „früher Schwangerschaftsverlust“, zurückzuführen sein, der leider nicht selten vorkommt. 1 von 4 Schwangerschaften endet mit einem solchen frühen Schwangerschaftsverlust. Wenn Sie unerwartete Ergebnisse erhalten, sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber.

6 Können Medikamente oder Erkrankungen mein Ergebnis beeinflussen?

Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformationen der Arzneimittel, die Sie einnehmen, sorgfältig durch, bevor Sie den Test durchführen. Arzneimittel, die hCG enthalten, können das Ergebnis beeinflussen. Eileiterschwangerschaften oder eine kürzliche Schwangerschaft, auch wenn diese nicht ausgetragen wurde, können das Testergebnis verfälschen. Wenn Sie kurz vor oder in den Wechseljahren sind, können Sie das falsche Ergebnis „Schwanger“ erhalten, obwohl Sie nicht schwanger sind. Hormontherapien mit Clomiphenicrat sowie Schmerzmittel, Alkohol, Antibiotika oder die Antibabypille sollten das Testergebnis nicht beeinträchtigen. Wenn Sie unerwartete Ergebnisse erhalten, sollten Sie Ihren Arzt kontaktieren.

7 Als ich den Test durchgeführt habe, hat sich die Testspitze nicht vollständig rosa gefärbt. Was soll ich tun?

Sie haben möglicherweise nicht genug Urin aufgetragen. Wenn jedoch die blaue Linie im Kontrollfenster innerhalb von 10 Minuten nach Anwendung des Tests erscheint, dann ist der Test korrekt abgelaufen. Erscheint innerhalb von 10 Minuten nach der Anwendung des Tests keine blaue Linie im Kontrollfenster, siehe F8.

8 Ich habe den Test durchgeführt, aber im Kontrollfenster wird keine blaue Linie angezeigt. Was soll ich tun?

Wenn Sie den Test vor mehr als 10 Minuten durchgeführt haben, dann ist der Test nicht korrekt abgelaufen. Gründe dafür könnten die folgenden sein:

- Die sich färbende Testspitze wurde nicht nach unten gehalten oder das Teststäbchen wurde nach Auftragen des Urins nicht flach hingelegt.
 - Sie haben zu viel oder zu wenig Urin aufgetragen.
- Wiederholen Sie den Test mit einem neuen Teststäbchen und halten Sie sich genau an die Gebrauchsanweisung. Es könnte ratsam sein, eine Urinprobe aufzufangen und einen Test mittels der Methode „Urinprobe“ durchzuführen.

9 Was mache ich, wenn ich mir bei dem Ergebnis nicht sicher bin?

Weitere Informationen finden Sie in den Abbildungen im Abschnitt „Ablesen Ihres Ergebnisses“.

Abbildung A

Ihr Ergebnis ist „Nicht Schwanger“. Falls Sie immer noch denken, dass Sie schwanger sein könnten, siehe F4.

Abbildung B-D

Ihr Ergebnis ist „Schwanger“. Das Erscheinungsbild der Linie im Ergebnisfenster kann variieren. Es spielt keine Rolle, wie blass oder dunkel die Linie ist, Ihr Ergebnis ist dennoch „Schwanger“.

Abbildung B:

Diese Art der Anzeige ist wahrscheinlicher, wenn Sie den Test vor dem Fälligkeitstag der Periode durchführen und die hCG-Konzentration in Ihrem Urin möglicherweise relativ gering ist.

Abbildung C:

Diese Anzeige erscheint typischerweise, wenn Sie am bzw. um den Fälligkeitstag Ihrer Periode testen.

Abbildung D:

So kann es aussehen, wenn Sie mehrere Tage nach dem Fälligkeitstag Ihrer Periode testen, da der hCG-Spiegel dann höher ist.

Wenn Sie sich immer noch unsicher sind, ob das Ergebnis korrekt ist, warten Sie mindestens 3 Tage, bevor Sie erneut testen und halten Sie sich genau an die Gebrauchsanweisung.

www.clearblue.com

Berater/innen sind Mo-Fr von 08:00 – 16:00 Uhr erreichbar, außer an Feiertagen.

0800 815 46

Kostenlos aus dem Festnetz, bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz können Kosten entstehen. Alle Anrufe werden aufgezeichnet und eventuell zur Qualitätskontrolle abgehört. Bitte halten Sie die Chargennummer **[LOT]** bereit.

Weitere Informationen und allgemeine Hinweise zum Thema Schwangerschaft finden Sie auf unserer Webseite:

www.clearblue.com

 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genf, Schweiz.
Clearblue ist eine Marke von SPD.
© 2016 SPD. Alle Rechte vorbehalten.

Dieser Test ist für die Verwendung zu Hause bestimmt.

Bei Raumtemperatur aufbewahren.

Bei Aufbewahrung im Kühlschrank vor der Verwendung mindestens 30 Minuten auf Raumtemperatur erwärmen lassen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Ausschließlich zur Verwendung in der *In-vitro*-Diagnostik.

Entsorgung im normalen Hausmüll.

Nicht verwenden, wenn die Folienverpackung beschädigt ist.

Teststäbchen nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.



0843



 IVD	Medizinisches Produkt für die <i>In-vitro</i> -Diagnostik	 LOT	Batch-Code
	Hersteller		Verfallsdatum
	Nicht wiederverwenden		Temperaturbegrenzung 2 °C - 30 °C